

NeoHug®

SUPPORT DE DISPOSITIF



FONCTIONS ET AVANTAGES

- Figurine de ludique disponible en cinq couleurs vives
- Bras pliables pour tenir une variété d'éléments légers
- Idéal pour porter une tétine, un embout d'aspiration, un ruban adhésif, etc.
- Deux options de fixation
- Circlip:
 - Se fixe à la plupart des potences pour intraveineuse
 - Se clipse et déclipse
 - Structure nervurée pour réduire le glissement
 - Se repositionne à plusieurs reprises sans résidu adhésif
- Ventouse:
 - Se fixe sur la plupart des surfaces lisses
 - Ventouse de grande taille pour une prise solide et un retrait facile
 - Tient sous la chaleur et l'humidité
 - Se repositionne à plusieurs reprises sans résidu adhésif



N° de catalogue	Objet	Unité de quantité
N680A-C	Circlip de chimpanzé assorti	25/boîte
N680A-S	Ventouse chimpanzé assortie	25/boîte
N681A-C	Circlip de sourire assorti	25/boîte
N681A-S	Ventouse de sourire assortie	25/boîte

Assortiment = 5 de chaque couleur

Brevet en instance



Le clinicien a inventé

NeoHug®

SUPPORT DE DISPOSITIF

INDICATIONS D'UTILISATION

NeoHug est destiné au support, au rangement ou au maintien des dispositifs médicaux non-utilisés.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION




- 1 Retirez NeoHug de son emballage et jetez le sac.
- 2a (circlip) Placez NeoHug sur la potence pour intraveineuse en appuyant le centre du circlip jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 2b (aspiration) Fixez NeoHug en appuyant fermement le centre de la ventouse contre une surface lisse et plane.

Remarque : En cas de pose dans des endroits très humides (c'est-à-dire à l'intérieur des couveuses), essuyez la surface avant la pose.

- 3 Pliez et adaptez les bras au besoin pour maintenir les éléments désirés.

Retrait

- 1 Remplacez NeoHug tous les 14 jours ou conformément au protocole hospitalier, selon la première de ces éventualités.
- 2a (circlip) Maintenez fermement le circlip et tirez pour la faire glisser. Ne l'enfilez pas sur la figurine en NeoHug.
- 2b (aspiration) Soulevez le support de la ventouse pour retirer NeoHug de la surface.

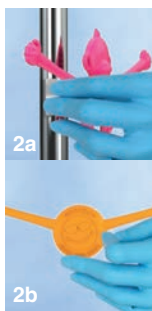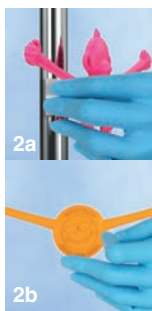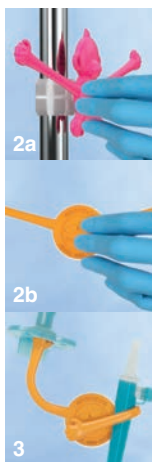

PRÉCAUTIONS

La ventouse doit être propre et exempte de saletés et de liquides.

Remplacez-le immédiatement s'il est manifestement sale ou endommagé.

Remplacer si le circlip ou la ventouse ne tient plus.

Ne forcez pas le clip en C sur un poteau de plus de 3/4 "de diamètre.

À usage unique exclusivement.