


NeoBond®

BANDES ADHÉSIVES HYDROCOLLOÏDES

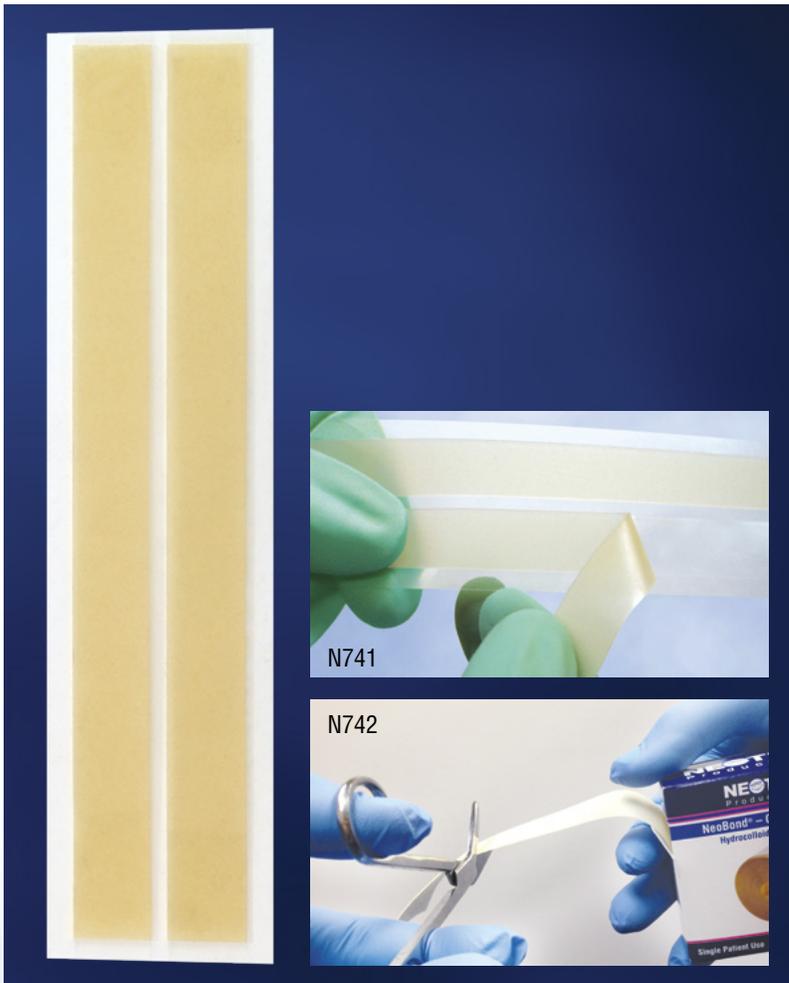

FONCTIONS ET AVANTAGES

- Alternative aux bandes acryliques plus respectueuse de la peau
- Conçues pour un maintien longue durée
- Idéales pour une utilisation avec les supports de membres
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

Catalogue	Taille	Qté/Unité
N741	1/2" x 6" Bandes	100/boîte*
N742	1" x 15' Rouleau	1/boîte

*50 ensembles de 2



NeoBond®

BANDES ADHÉSIVES HYDROCOLLOÏDES

INDICATIONS D'UTILISATION

Les bandes adhésives hydrocolloïdes NeoBond sont conçues pour un usage général en tant qu'adhésif médical.

INDICATIONS D'UTILISATION

Préparation

Nettoyer et sécher la peau conformément au protocole hospitalier.

Remarque : La peau doit être aussi propre et sèche que possible. NeoBond n'adhère pas correctement à une peau moite ou à des poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence..

NE PAS UTILISER D'ALCOOL.

Application

- 1 Avant de retirer le film protecteur, réchauffer la bande NeoBond entre ses mains pendant 60 secondes. Peut également être maintenue sous un incubateur radiant ou un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.
- 2 Retirer et jeter le film protecteur. Entourer la peau et le produit avec une bande NeoBond et la maintenir en place pendant 60 secondes pour assurer une bonne adhérence.

Retrait

- 1 Remplacer la bande NeoBond tous les cinq jours ou conformément au protocole hospitalier, selon la première de ces éventualités.
- 2 Imprégner la bande NeoBond d'eau ou de solution saline.
- 3 Retirer doucement la bande NeoBond de la peau tout en l'imbibant d'eau ou de solution saline.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement.

NeoBond n'adhère pas correctement à une peau moite ou à des poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.

Ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer la peau avant l'application.

À usage unique exclusivement.

