


NeoGlo®

TRANSILLUMINATEUR



Couleurs disponibles

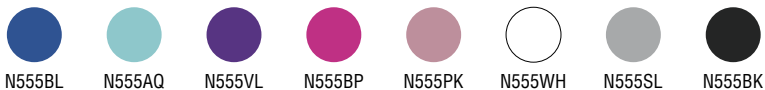

FONCTIONS ET AVANTAGES

- Lampes LED froides au toucher afin d'assurer plus de sécurité pour l'utilisateur
- Plusieurs configurations d'éclairage afin de satisfaire les préférences de l'utilisateur
- Conception ergonomique pour assurer le confort du médecin
- Petite taille à des fins d'utilisation dans un incubateur
- Illumine veines, artères et autres structures internes
- Conçu pour s'arrêter avant que les lampes ne deviennent inefficaces
- Ne nécessite qu'une seule pile alcaline AA (comprise)
- Huit couleurs au choix
- Dragonne
- Prix abordable
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

Manchon NeoGlo®

- Permet de contrôler et de limiter la prolifération des bactéries
- Durable et jetable
- Clapet auto-adhésif
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

Catalogue	Article	Qté/Unité
N555BL	Bleue	1/boîte
N555AQ	Aqua	1/boîte
N555VL	Violette	1/boîte
N555BP	Rose pétant	1/boîte
N555PK	Rose	1/boîte
N555WH	Blanche	1/boîte
N555SL	Argent	1/boîte
N555BK	Noire	1/boîte
N55100	Manchon Paquet de 100	100/boîte*

*Manchon NeoGlo®: achat minimum de 10 boîtes

Brevet américain en instance

INDICATIONS D'UTILISATION

Le transilluminateur NeoGlo est un appareil portable à pile. Il s'agit d'une source de lumière destinée à faire passer la lumière à travers les tissus pour faciliter l'examen du patient.

Le manchon NeoGlo est prévu pour être utilisé en tant que couverture protectrice afin que le transilluminateur NeoGlo reste propre.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Retirer le couvercle de la pile, insérer une pile alcaline AA (comprise) et remettre le couvercle en place.

Remarque : La configuration de l'éclairage s'exécutera le temps d'un cycle avant de revenir à l'arrêt.

*Attention : Ne fixez pas directement les lampes.
L'insertion de la pile dans le mauvais sens peut produire de la chaleur et endommager l'unité*

- 2 Sélectionner la configuration d'éclairage souhaitée :
 - Pour allumer les lampes blanches orientées vers l'avant, appuyer une fois sur le bouton Marche/ Arrêt. (⏻)
 - Appuyer de nouveau pour activer les lampes blanches orientées vers le haut.
 - Appuyer de nouveau pour activer les lampes rouges orientées vers le haut.
 - Appuyer de nouveau pour activer les lampes blanches et les lampes rouges orientées vers le haut.
 - Appuyer de nouveau pour éteindre.
 - Renouveler ces étapes autant que nécessaire.
- 3 Lorsque la configuration d'éclairage choisie est activée, orienter NeoGlo vers la peau du patient à des fins d'éclairage.

Remarque : Réduire l'éclairage de la pièce afin d'assurer un éclairage plus efficace.
- 4 Nettoyer NeoGlo à l'aide de tampons imbibés d'alcool/ CaviWipe™ après chaque utilisation.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Ne pas orienter la lumière directement vers les yeux.

Ne pas immerger NeoGlo dans un solution liquide.

Ne pas passer NeoGlo à l'autoclave. L'exposition à la vapeur ou à une humidité excessive peut causer des défaillances électriques.

N'utiliser que des piles alcalines AA. Ne pas insérer de piles rechargeables. Des piles mal insérées peuvent endommager l'appareil et annuler la garantie.

Éliminer NeoGlo conformément à la réglementation locale concernant les produits électroniques.