


NeoSnug® TUBING HOLDER

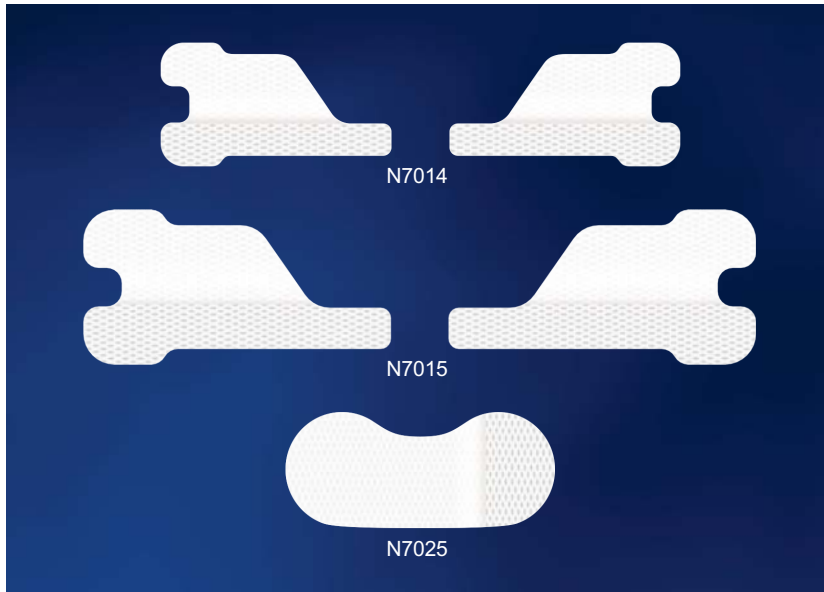

FONCTIONS & AVANTAGES

- Base adhésive hydrocolloïde NeoBond® respectueuse de la peau
- Forme unique idéale pour sécuriser le tube près des narines (N7014, N7015)
- NeoSnug Oral est idéal pour fixer les tubes en-dessous des lèvres (N7025)
- Rabat rabattable conçu pour soulager le stress sur les tubes
- Le rabat permanent maintient les tubes bien en place
- Le matériel non tissé épouse les contours du visage ou du corps
- Deux unités par ensemble avec support de tube gauche et droit

No. de catalogue	Grandeur	QTE/Boîte
N7014-15	Micro	30/boîte*
N7015-15	Petit	30/boîte*
N7025-40	Petit Oral	40/boîte

*15 ensembles de 2 (gauche/droit)

Brevet en
attente



NeoSnug®

SUPPORT DE TUBE

INDICATIONS D'UTILISATION

NeoSnug permet de poser, de fixer et de maintenir les sondes gastro-intestinales sur la peau des patients.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation

Nettoyer et sécher la peau à l'endroit où NeoSnug sera placé conformément au protocole hospitalier.

Remarque : Il est important que la peau soit aussi propre et sèche que possible. NeoSnug adhère moins bien à une peau moite et aux poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.

NE PAS UTILISER D'ALCOOL.

Application

- 1 Avant de retirer le film protecteur en plastique, les languettes adhésives hydrocolloïdes doivent être bien réchauffées. Vous pouvez les réchauffer selon les techniques suivantes: les tenir entre les paumes des mains pendant au moins 60 secondes, près d'un chauffage rayonnant pendant 10 à 15 secondes, ou contre un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.
- 2 Un par un, retirer le film plastique transparent imprimé de chaque NeoSnug, le placer sur la peau et le maintenir en place pendant 60 secondes afin d'assurer une bonne adhésion.
Remarque : Si vous utilisez un seul NeoSnug (N7014, N7015), garder le deuxième pour une utilisation ultérieure. Jeter le film protecteur une fois que la bande aura été placée
- 3 Rabattre la languette et retirer le film blanc en papier portant l'inscription « 1 » de la base du NeoSnug. Cela permet de dévoiler la surface adhésive
- 4 Placer le tube le long de la base.
- 5 Retirer le film blanc en papier portant l'inscription « 2 » de la languette et la rabattre sur le tube pour le maintenir en place.
Remarque : Une fois fermée, la languette NeoSnug reste définitivement en place. Il n'est pas possible de l'ouvrir et le fermer plusieurs fois.

Retrait

- 1 Remplacer le NeoSnug et les tubes qui y sont fixés tous les 5 jours ou conformément au protocole hospitalier, selon la première de ces éventualités.
- 2 Les tubes encore en place, imprégner NeoSnug d'eau ou de sérum physiologique.
- 3 Décollez doucement en tamponnant la peau avec de l'eau ou du sérum physiologique.
- 4 Retirer les tubes conformément au protocole de l'hôpital et jeter le NeoSnug et les tubes.

INFORMATION GÉNÉRAL

Matériaux du produit

Base adhésive hydrocolloïde NeoBond®, matériel non tissé, bande de transfert (n'entre pas en contact avec la peau).

Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et sans plastifiant DEHP

Grandeur

N7014 Micro fermé: 38 mm x 20.4 mm
N7015 Petit fermé: 50 mm x 25 mm N7025
Petit Oral fermé: 44.5 mm x 19 mm

Emballage

N7014, N7015: ensemble de deux emballées individuellement

N7025: emballé individuellement

Type d'emballage : Sac en polyéthylène Boîte distributrice

Visitez le site neotechproducts.com pour obtenir les informations les plus récentes.

PRECAUTIONS & AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

Risque d'étouffement. NeoSnug ne doit être utilisé que lorsque le patient est sous la surveillance directe et permanente de professionnels de santé qualifiés.

Risque d'ingestion ou d'aspiration.

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement.

NeoSnug adhère moins bien à une peau moite et aux poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.

N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer la peau avant application. Jetable. Ne pas réutiliser.

Destiné à l'usage d'un seul patient uniquement.

Certified



Corporation

Pour plus d'informations ou pour commander votre échantillon GRATUIT, appelez-le

1-800-966-0500 ou visiter neotechproducts.com

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355



Made in USA

M768 Rev B